

User Instruction Manual


Oxford® Classic Digital Weigh Scale

To avoid injury, read user manual prior to use. For alternative languages, contact your authorised service provider. Always refer to www.oxfordhealthcare.co.uk for latest revision.

Manuale d'uso per l'utente

Bilancia digitale Oxford® Classic

Per evitare possibili lesioni, prima dell'uso leggere questo manuale. Per altre lingue, contattare un Centro di assistenza autorizzato. Fare sempre riferimento a www.oxfordhealthcare.co.uk per l'ultima revisione.

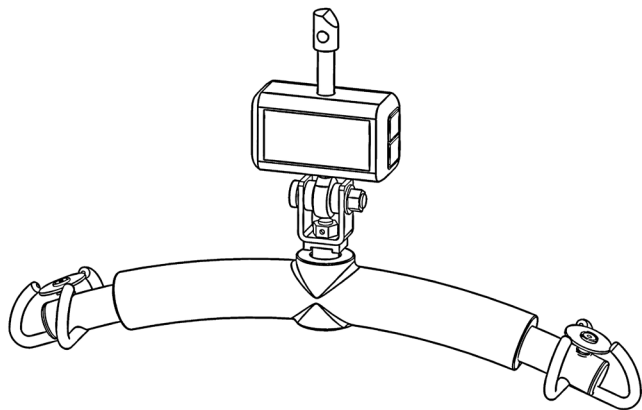

Contents

- 1. Introduction: About Your Scale 3
- 2. Assembly and Commissioning Instructions..... 4
- 3. Safety Precautions 5
- 4. Operating Instructions 7
- 5. Battery Replacement..... 9
- 6. Maintenance Schedule and Error Identification 10
- 7. Technical Specifications..... 11
- 8. Warranty 13

1. Introduction: About Your Scale

Statement of Intended Use

The Oxford Classic Digital Weigh-scale is a technologically advanced, microprocessor controlled, digital weighing device. It features a large, easy to read, Liquid Crystal Display (LCD) that shows the patient's weight. The scale is Class III certified, which means it will provide a highly accurate measurement of weight each and every time.

The Oxford Classic Digital Weigh-scale is powered by 6 x AAA size alkaline batteries and is specifically designed for use with the following lifts only:

- Oxford Mini
- Oxford Midi
- Oxford Major
- Oxford Maxi

Oxford strongly recommend that you use this scale on a flat hard surface. A soft surface such as carpet, may result in a false or inaccurate reading.

The CE mark: The Oxford Classic Digital Weigh-scale carries the CE mark and complies with the following standards and regulations:



- Medical Device Regulations (MDR 2017/745)
- EMC Directive (89/336/EEC)
- Low Voltage Directive (73/23/EEC)

Maximum Safe Working Load

The maximum safe working load of the Oxford Classic Digital Weigh-scale is 300kg.



The maximum safe working load for the lift which the scale is fitted to should never be exceeded.

Recycling

This product is not to be treated as regular household waste, but should be handed into an electrical/electronic equipment recycling centre.

You can obtain further details from your local council, your municipal waste disposal company or the supplier from where the product was purchased.

Note: this manual should be kept with the scale at all times.

Serious Incident Reporting

In the event of a serious incident taking place during use of this product, affecting the patient and/or care-giver, it must be reported to the product manufacturer or authorised distributor. Should the incident take place within the European Union (EU), it must also be reported to the local competent authority within the member state.

2. Assembly and Commissioning Instructions

Setting Up Your Scale

The following example illustrates how to set the AUTO-OFF function to 180 seconds and to disable the audible 'beep':

- STEP 1:** Press 'ZERO' key to switch scale on.

STEP 2: Press the 'HOLD' key for 3 seconds to enter 'SET-UP' mode.


STEP 3: Press the 'ZERO' key to enter 'AOFF' mode.

STEP 4: Press the 'HOLD' key to select '180 S' indicating that the AUTO-OFF time is 180 seconds.


STEP 5: Press the 'ZERO' key to select and return to 'AOFF' mode and press 'HOLD' to enter to 'BEEP' setup mode.

STEP 6: Press the 'ZERO' key to enter 'BEEP' setup mode and press 'HOLD' again to select between 'ON' and 'OFF'.

STEP 7: Press the 'ZERO' key to decide and return to 'BEEP' set-up mode.

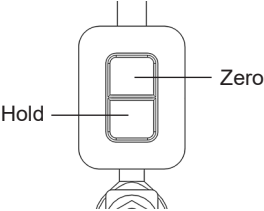STEP 8: Press the 'HOLD' key to select 'END' and press 'ZERO' to finish setting.
- 

Operation Flow

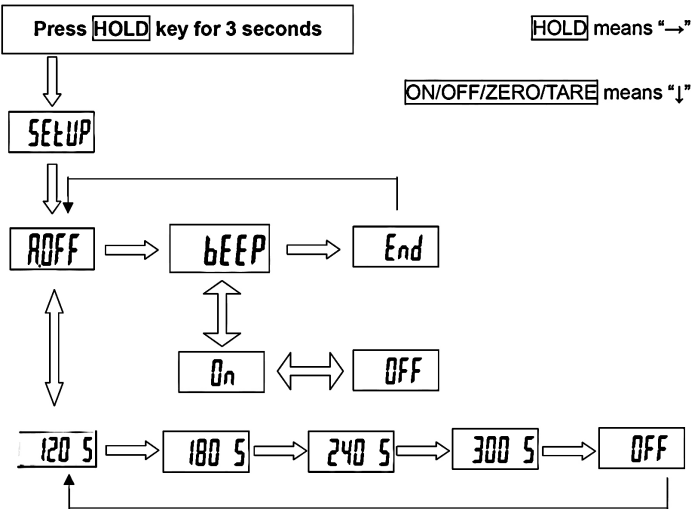


3. Safety Precautions

⚠ WARNING

Before using your scale, please ensure you have read and understood the contents of this manual. It contains important information and guidance for installation, safe use and general maintenance of the device.

The manufacturer shall not be liable for damages arising out of failure to comply with the following instructions:


- When using electrical components in safety critical environments, always conform to the relevant regulations.
- Incorrect installation or use other than in accordance with the instructions provided within this manual will render the warranty null and void.
- This device is designed for indoor use only.
- Ensure the scale is used within the specified operating temperature range.
- The scale meets requirements for electromagnetic compatibility.
- Ensure that the patient does not lean against the device due to a risk of falling.
- Following assembly to an Oxford patient lift, the scale must not be rotated horizontally. The scale should only be installed on a patient lift system which allows full 360° swivel. Rotation is only permitted in connection with 360° swivel bearings installed on the lift.
- The device must not be modified from its standard configuration. Unapproved modifications may result in injury and/or death to the patient and/or carer and will render all liability and warranty invalid.
- Cardon joints are assembled with the loadcell by the manufacturer. Manually twisting or adjusting cardon joints can cause instability and may result in injury and/or death to patient and/or carer.
- Always inspect the cardan joints before use for any signs of damage or looseness. If damage or looseness are detected, DO NOT USE.

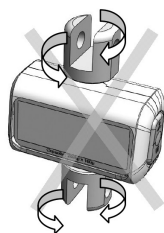

⚠ WARNING

- DO NOT exceed the maximum safe working load of the scale which is stated on the front panel and on the label on the reverse side of the scale. The scale will emit audible 'beeps' when loading exceeds the maximum rated capacity.
- NEVER exceed the safe working load of the lift that the scale is fitted to.

- All screws must be tightly secured.

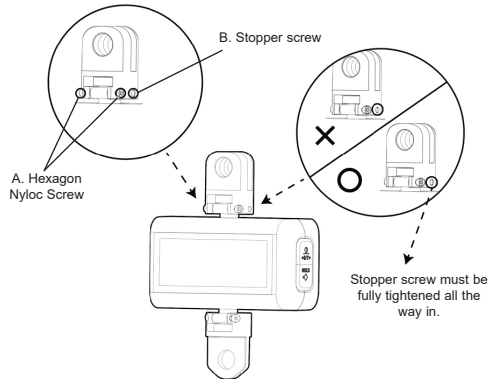


Nyloc screws must be tightened securely to the specifications.


Nyloc screws must be secured according to correct assembling procedure using a hex key and a torque driver.

1. Hold one side using the hex key.
2. Tighten the nyloc screws using a torque driver (repeat from the other side).

IMPORTANT: Torque strength must be set at 18kgf-cm +/- 1kgf-cm.

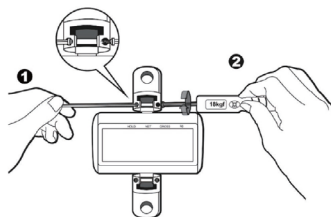

IMPORTANT: The nyloc screw must be secured from both sides (one side with the hex key, and the other side by the torque driver). The nyloc screw will not tighten, and will simply rotate in place if counter-force from the other side is not applied.

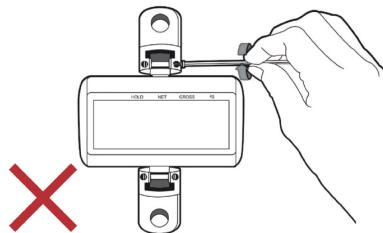

NOTE: If you require additional assistance with the set-up or use of your scale, please contact your local authorised dealer or Oxford direct.

4. Operating Instructions


Before reading detailed instructions on how to use all the weighing functions that are built into your scale, please read the following important operating instructions:

- Always ensure the display shows 'Zero' before use. If it does not then please press the ZERO key.
- The weigh-scale is designed to detect when a stable weight is achieved, your reading should be taken at this point.


⚠ CAUTION

Lift scale must NOT tilt at any time during the lifting operation.


IMPORTANT: If tilting is observed at any time, the lift scale must NOT be used.

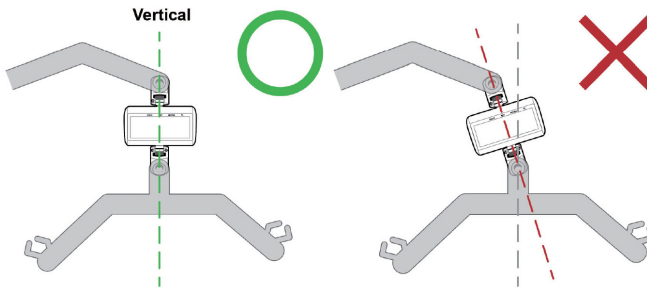

Panel indication

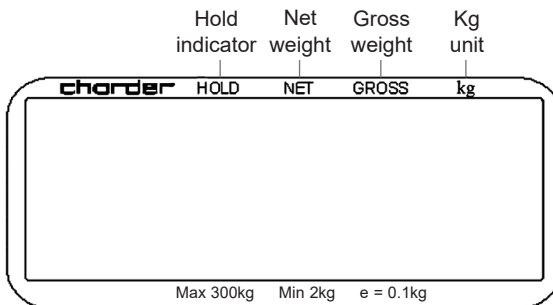

Key functions

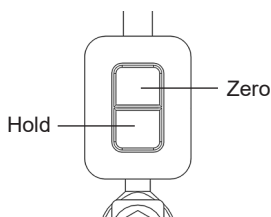

ON / OFF / ZERO / TARE

- Press to switch on.
- Press and hold for 3 seconds to switch off.
- Press to return to zero which is at condition of $\pm 2\%$ of full capacity.
- Press to tare the weight.

The TARE function can be used to subtract any additional weight, i.e. a patient's clothing or a sling to calculate a net value.

To use this function, simply weigh the additional items using the scale, press the '**ON/OFF/ZERO/TARE**' key so that the display reverts to zero.

You can now lift and weigh the patient as usual (including the additional items). The LCD display will now show a net value that excludes the weight of the additional items.

HOLD

- When the HOLD function is enabled, the scale will sample 5 to 10 sets of readings and analyse the discrepancy.
- Press to store the weight value.
- To disable the hold function, press the '**HOLD**' key again.

Feature settings

Auto-off time adjustment:

This feature adjusts auto-off period following non-operation. When the selected time period has elapsed, the device will shut off automatically to save battery life.

Pre-set options: 120 sec / 180 sec / 240 sec / 300 sec / Off.

Buzzer adjustment:

This function enables the user to turn the audible buzzer **ON** or **OFF** according to preference.


5. Battery Replacement

⚠ WARNING


- All batteries contain toxic compounds. Batteries should be disposed of according to the applicable legal requirements and/or via a competent organisation complying with the deposit of Poisonous Waste Regulation 1972.
- DO NOT incinerate batteries.
- The optimum operating temperature for the scale is between 5°C and +35°C. Although it will operate outside of this range, the scale's battery life will be adversely effected.
- When buying new batteries, select batteries low in harmful substances and no mercury (Hg), Cadmium (Cd) or Lead (Pb).

Instructions for replacing the battery


Your scale uses 6 x AAA size alkaline batteries. Please follow the instructions below for replacement.

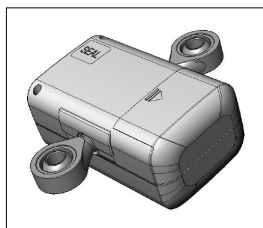


1. Locate the battery cover at the rear of scale.

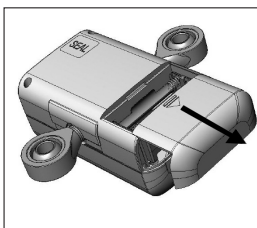


2. Remove the battery cover by sliding in the direction shown.

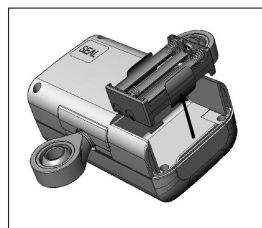


3. Remove the battery case.

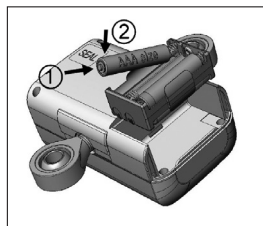

4. Install 6 x AAA size batteries. **Ensure correct polarity is observed.**

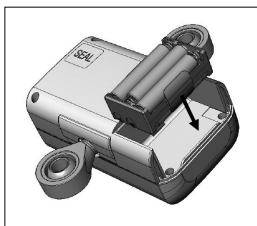

5. Reinstall the battery case as shown.

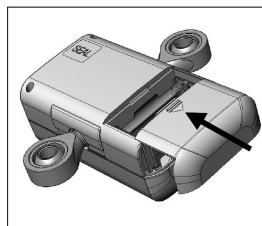

6. Replace the battery cover to complete the process.

6. Maintenance Schedule and Error Identification

Your scale does not require any routine maintenance, however, Oxford recommend you check the accuracy of the scale at regular intervals. The frequency of these checks is dependant on the level of use and the condition of the scale. If inaccuracies occur, please contact your local dealer or Oxford for further guidance. Additionally, the accuracy of the scale should be tested and verified as part of the routine periodic maintenance and inspection (LOLER).

Cleaning

- Always turn off the scale prior to cleaning.
- Oxford recommend using alcohol based wipes or similar when cleaning the scale.
- DO NOT use excessive amounts of water when cleaning the scale as this will cause damage to the electronics. You should also refrain from using corrosive liquids or high pressure washers.
- DO NOT use abrasive cleaning solutions as these could damage the surface finish of the scale.
- After cleaning, the scale should be thoroughly dried.

Error messages



Low battery indication:

This warning indicates that the voltage of the batteries is too low to operate. Please replace the batteries.




Zero high:

The loading has exceeded the upper limit of the scale. Please reduce the loading.




Zero low:

The loading has not achieved the lower limit of the scale. Please increase the loading.

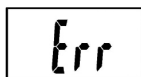


Over-load or counting error:

The upper load limit of the scale has been exceeded. Please reduce the loading and try again. If the problem persists please contact your local authorised dealer or Oxford.

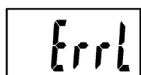

Counting error (too low):

The lower load limit of the scale has not been achieved. Please increase the loading and try again. If the problem persists, please contact your local authorised dealer or Oxford.

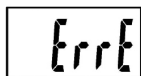

Eeprom error:

The software of the scale has encountered an error. If the problem persists, please contact your local authorised dealer or Oxford for resolution.


End of Life Disposal

Battery: All batteries in the product and any accompanying accessories must be recycled separately. Batteries should be disposed of in accordance with local or national regulations.

Slings: Slings and associated material accessories should be sorted as combustible waste in accordance with local or national regulations.

7. Technical Specifications

Technical data of cardan joint

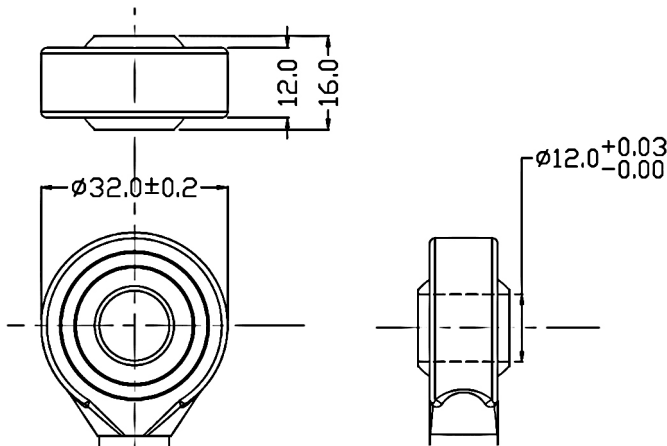

Capacity (Maximum safe working load)	300kg
Division	0.1kg
Accuracy	$\pm 0.15\text{kg}$
OIML Class	III
Display Options	1.0 inch 5 and 1/2 digits
Weight Unit	kg
Dimensions	120 x 70 x 160mm
Power Supply	1.5V AAA x 6 batteries
Operating Temp.	0° / 40°

NOTE: Only the kg unit is approved by OIML (International Organization of Legal Metrology)

KEY SYMBOLS:


The following symbols are used on the charger, control unit and battery:



Type B equipment, as per EN 60601-1.



Class 2 equipment.

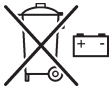

The disposal of batteries should not be mixed with general household waste. Batteries should be disposed of in accordance with local or national regulations.



The disposal of electronics should not be mixed with general household waste.



For indoor use.



ATTENTION, consult accompanying documents.



Refer to the user instructions before use (Blue background).



Certification mark indicating conformity with the applicable requirements for products sold within Great Britain.



A point of contact between the non-European medical device manufacturer, the national Competent Authorities (Ministry of Health) and Notified Bodies.



A unique device identification intended to provide single, globally harmonised positive identification of medical devices through distribution and use.



Indicates the entity importing the medical device into the locale.

8. Warranty

Oxford has an established network of authorised distributors and service agents who will be pleased to handle all of your purchasing, warranty, repair and maintenance enquiries. It is recommended that our products are commissioned by your authorised distributor or service agent.

The distributor or service agent operates the warranty programme, so it is important to keep a record of their name, address and telephone number so they can be contacted should any problem arise. If you are in any doubt as to where your lift was purchased, Oxford can trace the supplier if you quote the serial number of the lift.

All warranty claims are subject to the correct use and maintenance in accordance with the user instruction manual provided with each lift. Damage caused by use in unsuitable environmental conditions or failure to maintain the product in accordance with user and service instructions is not covered. Your statutory rights remain unaffected.

REMEMBER: Contact your authorised distributor or service agent for purchases, repairs, servicing and certified maintenance.

Your distributor:

Sommario

- 1. Introduzione: La vostra bilancia 15
- 2. Istruzioni per il montaggio e la messa in opera 16
- 3. Misure di sicurezza 17
- 4. Istruzioni per il funzionamento 19
- 5. Sostituzione delle pile 21
- 6. Piano di manutenzione e identificazione degli errori 22
- 7. Specifiche tecniche 23
- 8. Garanzia 25

1. Introduzione: La vostra bilancia

Destinazione d'uso

La bilancia digitale Oxford Classic è un dispositivo digitale tecnologicamente avanzato, controllato da un microprocessore. L'ampio visore a cristalli liquidi (LCD) facilita la lettura del peso del paziente. La bilancia è un dispositivo certificato di Classe III, e questo significa che riporterà sempre e in ogni occasione il peso del paziente con un alto livello di precisione.

La bilancia digitale Oxford Classic è alimentata da 6 pile alcaline "AAA" ed è specificatamente destinata ai soli sollevatori qui di seguito indicati:

- Oxford Mini
- Oxford Midi
- Oxford Major
- Oxford Maxi

Oxford raccomanda vivamente di usare la bilancia su una superficie stabile e in piano. Il posizionamento su una superficie morbida (per es., moquette) potrebbe generare una visualizzazione di valori non corretti o non precisi.

Il marchio CE: Alle bilance digitali Oxford Classic è applicato il marchio CE, e sono conformi alle seguenti direttive CE:



- Direttiva sui dispositivi medici (93/42/CEE)
- Direttiva sulla compatibilità elettromagnetica (89/336/CEE)
- Direttiva bassa tensione (73/23/CEE)

Carico massimo di sicurezza

Il carico massimo di sicurezza delle bilance digitali Oxford Classic è di 300 kg.

AVVERTENZA

Non eccedere mai il carico massimo previsto per il sollevatore sul quale è installata la bilancia.

Riciclo/smaltimento

Non smaltire questo prodotto come rifiuto domestico, ma conferirlo a un centro di raccolta di dispositivi elettrici/elettronici.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alle aziende locali per lo smaltimento dei rifiuti o al rivenditore che ha fornito la bilancia.

Nota: conservare sempre questo manuale insieme alla bilancia.

Segnalazione di incidenti gravi

Nel caso in cui durante l'uso di questo prodotto si sia verificato un incidente grave che abbia coinvolto l'utente o l'assistente è necessario segnalarlo al fabbricante del prodotto o al rivenditore autorizzato. Se l'incidente si verifica in uno Stato dell'Unione europea (UE) lo si deve segnalare anche all'Autorità competente dello Stato membro di residenza.

2. Istruzioni per il montaggio e la messa in opera

Configurazione della bilancia

L'esempio qui riportato indica come configurare la funzione di spegnimento automatico (AUTO-OFF) dopo 180 secondi e come disattivare l'emissione di segnali sonori.

PASSO 1: premere il pulsante "ZERO" per accendere la bilancia.

PASSO 2: Premere e mantenere premuto per 3 secondi il pulsante "HOLD" per accedere alla modalità di configurazione "SET-UP".

PASSO 3: Premere il pulsante "ZERO" per accedere alla modalità di spegnimento automatico "AOFF".


PASSO 4: Premere il pulsante "HOLD" per selezionare "180 S" (spegnimento automatico [AUTO-OFF] dopo 180 secondi).

PASSO 5: Premere il pulsante "ZERO" per confermare e ritornare alla modalità di spegnimento automatico "AOFF"; quindi, premere il pulsante "HOLD" per confermare e accedere alla modalità di configurazione dell'emissione dei segnali sonori "BEEP".


PASSO 6: premere il pulsante "ZERO" per accedere alla modalità di configurazione dei segnali sonori "BEEP" e, quindi, premere di nuovo il pulsante "HOLD" per selezionare le opzioni di attivazione "ON" e di disattivazione "OFF".

PASSO 7: premere il pulsante "ZERO" per confermare e ritornare alla modalità di configurazione dei segnali sonori "BEEP".

PASSO 8: premere il pulsante "HOLD" per terminare l'operazione "END" e, quindi, premere il pulsante "ZERO" per concludere la configurazione.

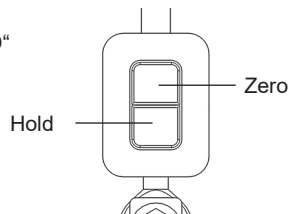

Flusso dell'operazione

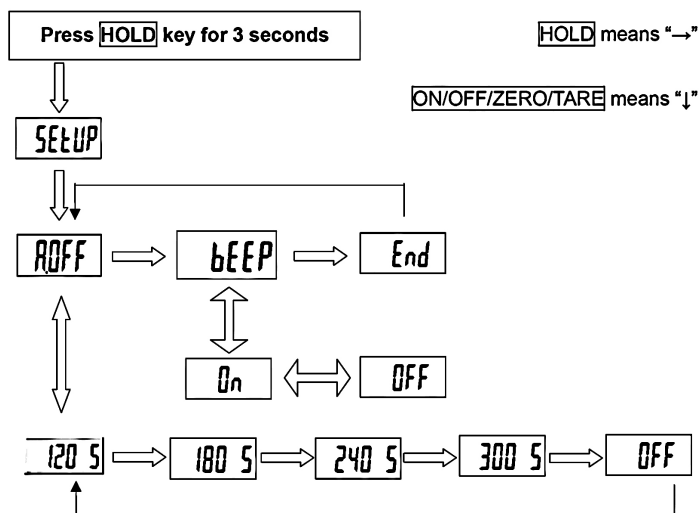


3. Misure di sicurezza

⚠ AVVERTENZA

Prima di usare la bilancia è importante aver letto e compreso il contenuto di questo manuale. Contiene informazioni e indicazioni importanti per l'installazione, l'uso in sicurezza e la manutenzione generale del dispositivo.

Il produttore non potrà essere ritenuto responsabile per danni emergenti dal mancato rispetto delle istruzioni qui di seguito riportate.


- Quando si usano componenti elettrici in ambienti nei quali la sicurezza è un elemento critico, attenersi sempre ai relativi regolamenti in vigore.
- L'installazione non corretta o l'uso non conforme alle istruzioni fornite in questo manuale annulleranno la garanzia.
- Questo dispositivo è destinato esclusivamente all'uso in ambienti interni.
- Accertarsi di utilizzare la bilancia entro la gamma di temperature indicata.
- La bilancia ottempera ai requisiti previsti in materia di compatibilità elettromagnetica.
- Per evitare il rischio di cadute, accertarsi che il paziente non si sporga in direzione del dispositivo.
- Dopo l'assemblaggio su un sollevatore per pazienti Oxford, la bilancia non deve essere ruotata orizzontalmente. La bilancia deve essere installata solo su un sollevatore per pazienti che consenta una rotazione completa di 360°. La rotazione è consentita solo in combinazione con cuscinetti girevoli a 360° installati sul sollevatore.
- Non modificare la configurazione standard del dispositivo. Le modifiche non approvate possono causare lesioni personali e/o la morte del paziente e/o dell'operatore e annulleranno tutte le responsabilità e le condizioni di garanzia.
- I giunti cardanici sono montati con la cella di carico dal fabbricante. La rotazione manuale o la regolazione dei giunti cardanici possono determinare instabilità e causare lesioni personali e/o morte del paziente e/o dell'operatore.
- Ispezionare sempre i giunti cardanici prima dell'uso per verificare eventuali segni di danneggiamento o allentamento. Se si rilevano danni o allentamenti, **NON UTILIZZARE**.

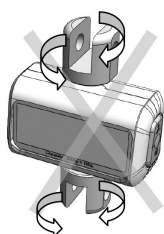

⚠ AVVERTENZA

- **NON** eccedere il carico massimo di sicurezza della bilancia riportato sul pannello frontale e sull'etichetta applicata sul retro della bilancia. Quando il carico è superiore a quello massimo consentito vengono emessi dei segnali sonori (Bip).
- **NON** eccedere **MAI** il carico massimo di sicurezza del sollevatore sul quale è montata la bilancia.

- Tutte le viti devono essere serrate saldamente.

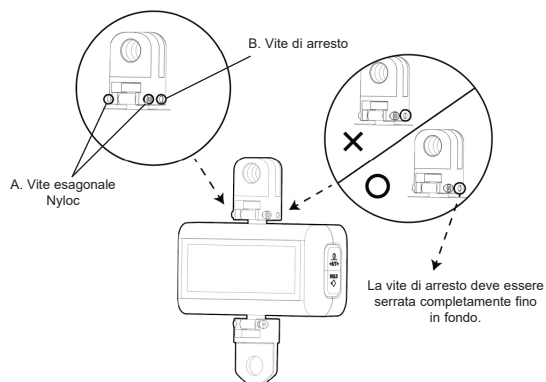


Le viti Nyloc devono essere serrate saldamente secondo le specifiche.


Le viti Nyloc devono essere fissate secondo la corretta procedura di montaggio utilizzando una chiave esagonale e un cacciavite dinamometrico.

1. Tenere premuto un lato utilizzando la chiave esagonale.
2. Stringere le viti Nyloc utilizzando un cacciavite dinamometrico (ripetere dall'altro lato).

IMPORTANTE: la coppia deve essere impostata su 18 kgf-cm +/- 1 kgf-cm..

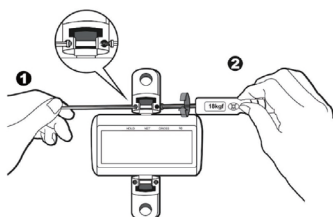

IMPORTANTE: la vite Nyloc deve essere fissata da entrambi i lati (un lato con la chiave esagonale e l'altro con il cacciavite dinamometrico). La vite Nyloc non si stringerà e ruoterà semplicemente in posizione se non viene applicata una forza contraria dall'altro lato.

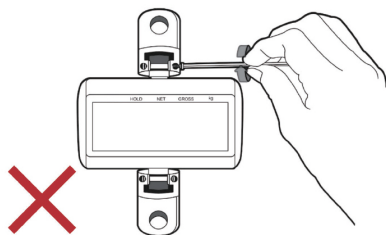

NOTA: se hai bisogno di ulteriore assistenza con l'installazione o l'uso della bilancia, contatta il tuo rivenditore autorizzato locale o direttamente Oxford.

4. Istruzioni per il funzionamento


Prima di procedere con la lettura delle istruzioni dettagliate relative all'uso di tutte le funzioni di pesatura integrate nella bilancia si raccomanda di leggere le istruzioni operative qui di seguito riportate.

- Prima dell'uso verificare sempre che il visore riporti l'indicazione "0" (zero). In caso contrario, premere il pulsante di azzeramento "ZERO".
- La bilancia è programmata per riconoscere una condizione di peso stabile: rilevarne il valore solo dopo aver raggiunto questa condizione.


⚠ ATTENZIONE

La bilancia di sollevamento **NON** deve inclinarsi in nessun momento durante l'operazione di sollevamento.


IMPORTANTE: se si nota un'inclinazione in qualsiasi momento, la bilancia di sollevamento **NON** deve essere utilizzata..

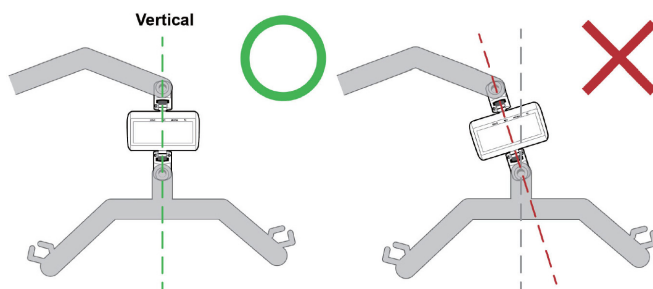

Indicazioni sul pannello

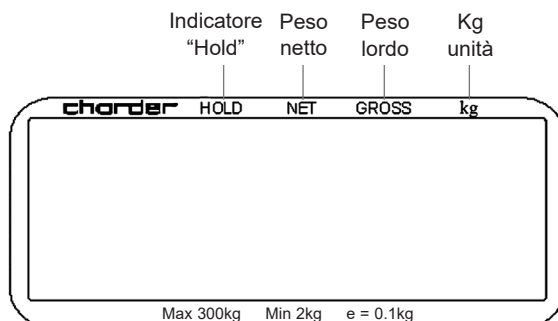

Funzioni principali

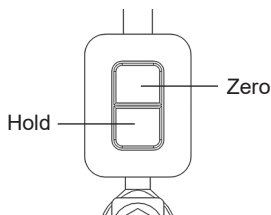

ON/OFF/ZERO/TARE

- Premere per accendere la bilancia.
- Premere e mantenere premuto per 3 secondi per spegnere la bilancia.
- Premere per azzerare (tolleranza del $\pm 2\%$ della capacità totale).
- Premere per impostare la tara della pesatura.

La funzione della tara (TARE) consente di sottrarre il peso di eventuali articoli aggiuntivi (per es., indumenti del paziente o imbracatura) per determinare il peso netto.

Per usare questa funzione, usare la bilancia per rilevare il peso degli articoli aggiuntivi premendo il pulsante **"ON/OFF/ZERO/TARE"** fino alla visualizzazione del valore **"0"** (zero).

Ora sarà possibile sollevare e pesare il paziente (compresi gli articoli aggiuntivi). Il visore LCD visualizzerà il valore del peso netto, con esclusione del peso degli articoli aggiuntivi.

HOLD

- L'attivazione della funzione **"HOLD"** consente alla bilancia di eseguire da 5 a 10 serie di letture e di analizzare eventuali discrepanze.
- Premere il pulsante per memorizzare il valore del peso.
- Per disabilitare la funzione, premere di nuovo il pulsante **"HOLD"**.

Configurazione delle funzioni

Impostazione del tempo per lo spegnimento automatico (Auto-Off)

Questa funzione imposta il tempo di spegnimento della bilancia quando non è in uso. Trascorso il periodo di tempo impostato, la bilancia si spegnerà automaticamente per risparmiare la carica della batteria.

Opzioni predefinite: 120 sec / 180 sec / 240 sec / 300 sec / Off (Disattivato).

Impostazione del cicalino (emissione di segnali sonori)

Questa funzione consente all'utente di attivare **ON** o disattivare **OFF** il cicalino.


5. Sostituzione delle pile

⚠ AVVERTENZA


- Tutte le pile contengono composti tossici. Le pile devono essere smaltite attenendosi ai requisiti legali in vigore in materia di smaltimento e/o conferite a un'organizzazione di smaltimento autorizzato in conformità al Poisonous Waste Regulation (Regolamento relativo ai rifiuti tossici) del 1972.
- NON incenerire le batterie.
- La temperatura operativa ottimale della bilancia va da +5 °C a +35 °C. Anche se può essere utilizzata al di fuori di questa gamma, questo potrebbe influire sulla vita utile delle pile.
- Quando si acquistano pile nuove scegliere quelle con basso contenuto di sostanze dannose e senza mercurio (Hg), cadmio (Cd) o piombo (Pb).

Istruzioni per la sostituzione delle pile

La bilancia utilizza 6 pile alcaline "AAA". Prima di procedere con la sostituzione attenersi alle istruzioni qui riportate.

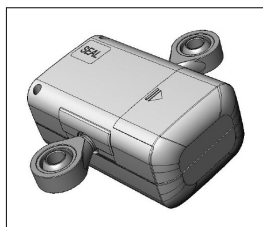


1. Identificare la copertura dell'alloggiamento delle pile sul retro della bilancia.

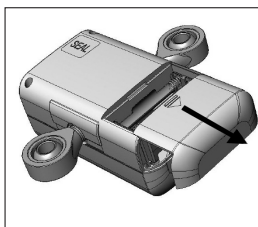


2. Rimuoverla facendola scorrere nella direzione indicata.




3. Estrarre il contenitore delle pile.

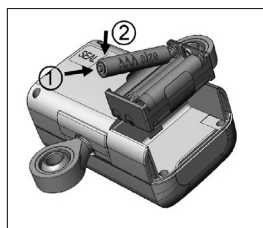

4. Inserire 6 pile "AAA" nuove. Inserirle rispettando la polarità corretta.

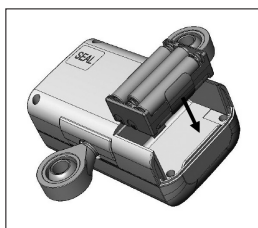

5. Riposizionare il contenitore delle pile come indicato.

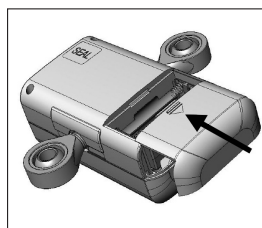

6. Concludere la procedura riposizionando la copertura dell'alloggiamento delle pile.

6. Piano di manutenzione e identificazione degli errori

La bilancia non richiede manutenzione periodica, ma Oxford raccomanda di verificare periodicamente l'accuratezza dei valori della bilancia. La frequenza di queste verifiche dipende dal livello di utilizzo e dalle condizioni della bilancia. In caso di valori non accurati, contattare per ulteriore assistenza il rivenditore autorizzato o Oxford. Inoltre, è necessario sottoporre la bilancia a prove e a verifiche periodiche della precisione come previsto dai Regolamenti sulle operazioni di sollevamento e sulle attrezzature di sollevamento (LOLER).

Pulizia

- Spegnerla la bilancia prima di procedere con la pulizia.
- Per la pulizia Oxford raccomanda di usare salviette a base di alcol o altri prodotti simili.
- Quando si pulisce la bilancia NON usare quantità eccessive di acqua in quanto potrebbero danneggiare i componenti elettronici. Evitare di usare liquidi corrosivi o sistemi di pulizia a pressione.
- NON usare soluzioni detergenti abrasive in quanto potrebbero danneggiare le finiture superficiali della bilancia.
- Dopo la pulizia asciugare completamente la bilancia

Messaggi di errore



Indicatore di batteria quasi scarica

Indica che la tensione delle pile è insufficiente per la corretta operatività della bilancia. Sostituire le pile.




Zero massimo

Indica che il carico ha superato il limite di carico massimo della bilancia. Ridurre il carico.




Zero minimo

Indica che il carico non ha raggiunto il limite di carico minimo previsto per la bilancia. Aumentare il carico.

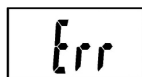


Sovraccarico o errore di rilevazione

Indica il superamento del limite di carico massimo della bilancia. Ridurre il carico e riprovare. Se il problema persiste, contattare il rivenditore locale autorizzato o Oxford.

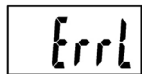

Errore di rilevazione (troppo basso)

Indica che non è stato raggiunto il limite di carico minimo della bilancia. Aumentare il carico e riprovare. Se il problema persiste, contattare il rivenditore locale autorizzato o Oxford.

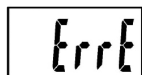

Errore EEPROM

Indica che si è verificato un errore nel software della bilancia. Se il problema persiste, contattare il rivenditore locale autorizzato o Oxford.


Smaltimento a fine vita

Batteria: Tutte le batterie del prodotto e tutti gli accessori devono essere riciclati separatamente. Le batterie devono essere smaltite attenendosi alle normative locali o nazionali in vigore.

Imbracature: Le imbracature e gli accessori associati devono essere considerati come materiali infiammabili attenendosi ai regolamenti di smaltimento locali in vigore.

7. Specifiche tecniche

Dati tecnici del giunto cardanico

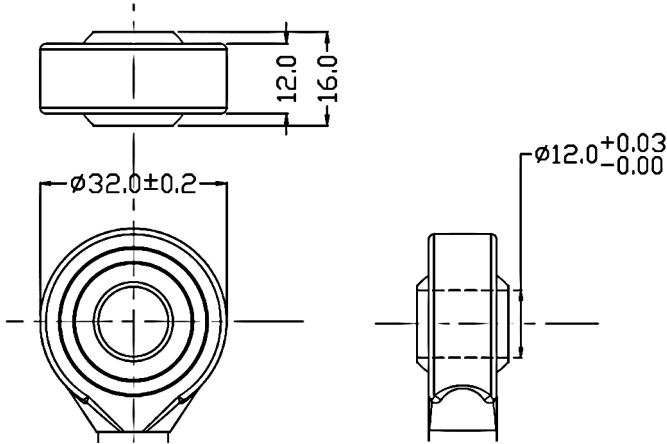

Capacità (Carico di lavoro massimo di sicurezza)	300 kg
Suddivisione	0,1 kg
Precisione	$\pm 0,15$ kg
Classe OIML	III
Opzioni visualizzazione	5 e 1/2 cifre, 1,0"
Unità di pesatura	kg
Dimensioni	120 x 70 x 160 mm
Alimentazione	6 pile "AAA" da 1,5 V
Temp. di esercizio	0° / 40°

NOTA: OIML (Organizzazione internazionale di metrologia legale) ha approvato solo l'unità di peso espressa in "kg"

SIMBOLI:

Sul caricabatterie, sull'unità di controllo e sulla batteria sono applicati i simboli seguenti:



Apparecchiatura di tipo B, conforme alla norma EN 60601-1.



Apparecchiatura di Classe 2.



Smaltire le batterie separatamente dai rifiuti domestici indifferenziati. Le batterie devono essere smaltite nel rispetto dei regolamenti locali o nazionali in vigore.



Smaltire i componenti elettronici separatamente dai rifiuti domestici indifferenziati.



Per solo uso in ambienti interni.



ATTENZIONE: fare riferimento alla documentazione di accompagnamento



Prima dell'uso fare riferimento alle Istruzioni per l'utente (sfondo blu).



Marchio di certificazione che indica la conformità ai requisiti richiesti per i prodotti commercializzati in Gran Bretagna.



Indicazioni per contattare il fabbricante di dispositivi medici non europeo, le Autorità nazionali competenti (Ministero della salute) ed Enti certificati.



Identificazione univoca del dispositivo destinata a fornire un'indicazione univoca e armonizzata per la distribuzione e l'utilizzo di Dispositivi medici.



Indica l'entità che importa il Dispositivo medico nel mercato locale.

8. Garanzia

Oxford ha una propria rete di rivenditori autorizzati e di centri di assistenza che saranno lieti di gestire tutte le richieste di acquisto, garanzia, riparazione e manutenzione. Si raccomanda di fare eseguire la messa in servizio dei nostri prodotti da un rivenditore o da un centro di assistenza autorizzato.

I rivenditori o i centri di assistenza gestiscono i programmi di garanzia e, pertanto, è importante annotarne il nome, l'indirizzo e il numero di telefono, in modo da poterli contattare in caso di necessità. Se non si è sicuri di dove sia stato acquistato il sollevatore, Oxford potrà rintracciare il rivenditore mediante il numero di serie del sollevatore.

Tutte le richieste di intervento in garanzia sono soggette all'uso appropriato e al rispetto del programma di manutenzione dell'apparecchiatura, così come descritti nel Manuale per l'utente fornito con ogni sollevatore. La garanzia non copre eventuali danni causati dall'uso in condizioni ambientali non appropriate, oppure dalla mancata osservanza del programma di manutenzione indicato nelle istruzioni per l'utente e di assistenza. Rimangono, tuttavia, inalterati i diritti garantiti dalle leggi in vigore.

RICORDARE: Per gli acquisti, le riparazioni, l'assistenza e gli interventi di manutenzione certificati rivolgersi sempre al rivenditore o a un centro di assistenza autorizzato.

Rivenditore/Distributore:

oxford

 Oxford Medical Healthcare Ltd
Drakes Broughton Business Park, Worcester Road, Drakes Broughton
Persore, Worcestershire, WR10 2AG United Kingdom
(T) 0344 811 1158 • (W) www.oxfordhealthcare.co.uk • (E) info@oxfordhealthcare.co.uk